


# Tourni-KEY


**citizen**  
**AID**

Stop life threatening  
limb bleeding with  
**Tourni-KEY**

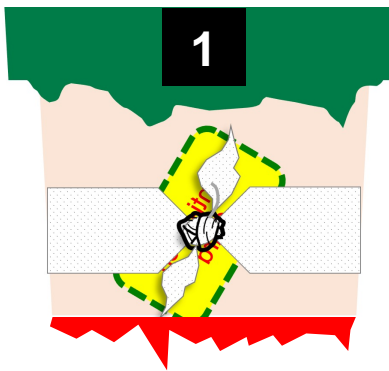


## 1. WRAP

...the triangular bandage [or strip of cloth] around the injured limb and cross over the ends. Now insert the anti-pinch card underneath the knot, pull the ends tight to hold in place.

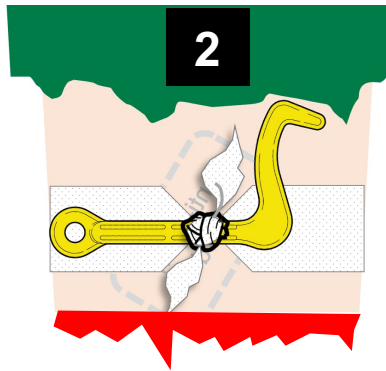


## 2. TIE

Insert the Tourni-KEY using a knot to secure it.

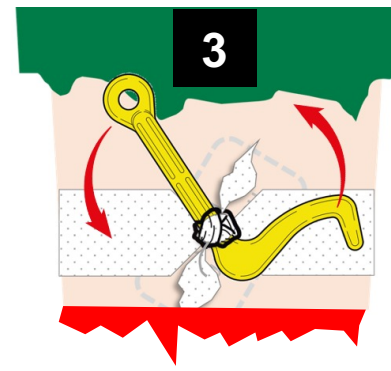

## 3. TWIST

... the Tourni-KEY until the bleeding has stopped – this may hurt the casualty.

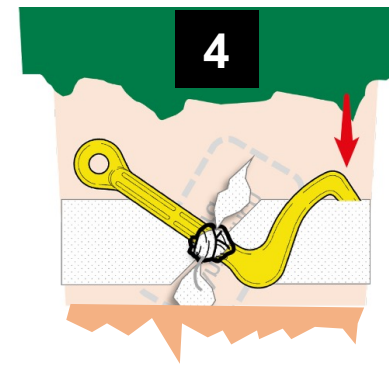

## 4. HOOK

... under the triangular bandage to lock it in place.

Зупиніть  
небезпечну для  
життя кровотечу  
з кінцівок за  
допомогою  
**Tourni-KEY**

## 1. ОБГОРНІТЬ

...трикутну пов'язку [або смужку тканини] навколо пошкодженої кінцівки та перехрестіть кінці. Потім вставте картку під вузол щоб запобігти защемленню тканин, міцно затягніть та зафіксуйте кінці.

## 2. ПРИВ'ЯЖІТЬ

Закріпіть Tourni-KEY зв'язавши вузол

## 3. ОБЕРТАЙТЕ

... Tourni-KEY до зупинки кровотечі – це може спричинити біль потерпілому.

## 4. ЗАЧЕПІТЬ

... Tourni-KEY підпов'язкою, щоб зафіксувати його на місці.

Остановите  
опасное для  
жизни  
кровотечение из  
конечностей с  
помощью  
**Tourni-KEY**

## 1. ОБМОТАЙТЕ

...треугольную повязку [или полоску ткани] вокруг поврежденной конечности и скрестите концы. Теперь вставьте карту предупреждающую защемление под узел, крепко затяните концы, чтобы зафиксировать их на месте.

## 2. ПРИВЯЖИТЕ

Вставьте Tourni-KEY, и привяжите его узлом.

## 3. КРУТИТЕ

... Tourni-KEY до тех пор, пока не остановится кровотечение — это может причинить боль пострадавшему.

## 4. ЗАЧЕПИТЕ

... Tourni-KEY под повязкой, чтобы зафиксировать ее на месте.